

Automatisk fald-detektor*

Du skal bære din Vibby OAK på dig hele tiden, enten som et armbånd eller om din hals i et vedhæng. Alt andet brug kan føre til fejlarmer.

Din leverandør vil konfigurere og indstille din Vibby OAK til brug som enten armbånd eller som et vedhæng, afhængig af dit behov. Du må ikke ændre din brugeropsætning uden at have kontaktet din leverandør.


FUNKTIONER

Manuel alarm (Billede 1):

I midten af din Vibby OAK sidder en alarmknap markeret ved tre "prikker". For at aktivere en alarm manuelt, skal du trykke her.

Automatisk alarm (Billede 2):


Ved hjælp af sensorer, bliver der automatisk sendt en alarm ved et "hårdt fald". 20 sekunder efter at faldet er detekteret, og inden at alarmen bliver sendt videre til modtagerenheden, vil Vibby OAK begynde at vibrere og blinke i 20 sekunder. Hvis du vil annullere alarmen før den bliver sendt videre, skal du blot placere din hånd lige over Vibby OAK indtil den stopper med at vibrere, og derefter fjerne hånden igen.

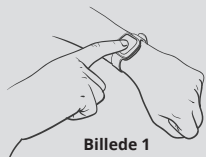

Billede 1



Billede 2

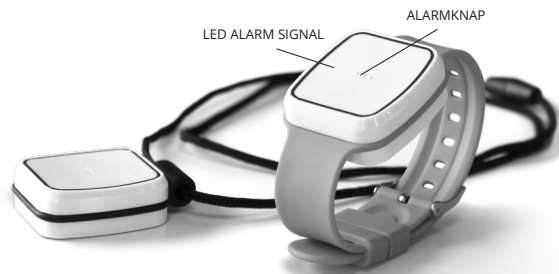

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vægt: 35g
Vandafvisning: IP67
Stødmodstand: IK04
Rengøring: Kun med mild sæbe og vand.
Materialer: Allergivenligt

	Radiofrekvens	Power
ISM	869.2125 og 869.2375 MHz	-8 dBm
BLE	2400 – 2483.5 MHz	-5 dBm

Overvågning af radioforbindelsen mellem Vibby OAK og senderen.

Radio rækkevidde: 300 meter udendørs

Drifttemperatur rækkevidde: +5 °C / +40 °C

Batterilevetid: CR2477 / LiMnO₂

- Op til 2 år.
- Skiftning af batterier skal gøres af din leverandør.

Opbevaring anbefaling

- Temperatur: +10°C~+25°C
- Fugtighed: fra 40% til 95%

FORORDNINGER OG SIKKERHEDSREGLER

EU-overensstemmelseserklæring

Vi bekræfter hermed at Vibby OAK, designet af Vitalbase, "the Telecom Design healthcare division", lever op til de vigtigste krav og andre tilhørende bestemmelser fra direktiverne 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS-2) and EC 1907/2006: NO_SVHC REACH. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan findes på <http://docs.vitalbase.fr>.

WEEE

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

FORSIKTIG: Batteri

- Batteriet må ikke svelges. Fare for kemisk forbrænding
- Dette produktet indeholder et knappebatteri. Hvis knappebatteriet svelges, kan det forårsage alvorlig indvendig forbrænding i løbet af bare to timer, og kan medføre dødsfald.
- Nye og brugte batterier opbevares utilgængelig for barn. Hvis batterirummet ikke lukkes skikkelig, må produktet ikke bruges. Det må opbevares utilgængelig for barn. Hvis du tror batterier kan have blottet svelget eller ført ind i en kropsdel, må lege kontaktes umiddelbart.
- Eksplosionsfare hvis batteriet erstattes med et batteri af feil type.
- Hvis batteriet kastes i et lidsted eller en varm ovn, eller hvis et batteri knuses eller skjæres opp mekanisk, kan det føre til eksplosion.
- Hvis et batteri etterlates i omgivelser med svært høy temperatur, kan det føre til eksplosion eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.



IP 67



***VIGTIGT:** De faldsprøngsteknologier, som Vibby OAK understøtter, kan ikke analysere/tyde alle fald-situationer. Hvis du falder, og du ikke kan mærke at Vibby OAK vibrerer, skal du blot trykke på alarmknappen for at aktivere et manuel alarmkald. www.vitalbase.care